


Parafuso Bioabsorvível para Cirurgias de Ligamentoplastia

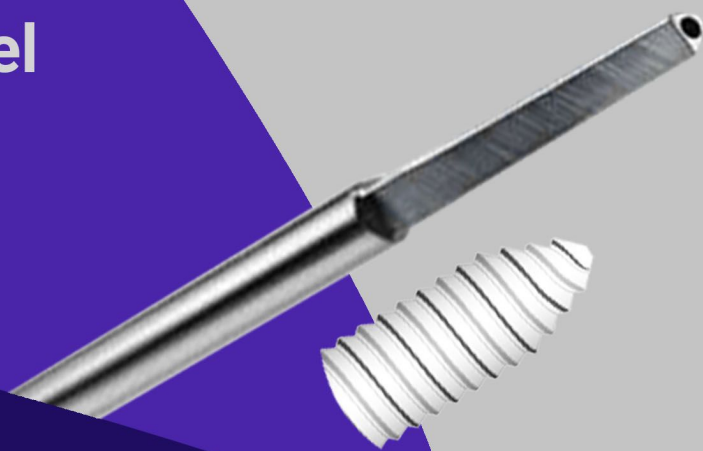

Registro Anvisa nº 81207910019

Características:


O Rock Screw TCP é um parafuso canulado bioabsorvível especialmente desenvolvido para procedimentos cirúrgicos de reconstrução de ligamentos cruzados posterior e anterior, reinserção da cabeça longa do tendão do bíceps e ligamentos do tornozelo. A linha Rock Screw TCP oferece uma gama completa de parafusos que permitem a fixação segura dos enxertos.

Composição

Material Sintético e Biocompatível:

A combinação homogênea de PLA + β -TCP é conseguida por reação química. A presença de TCP na matriz de PLA mantém o pH neutro do material durante o tempo de degradação o que reduz o risco de inflamação, além de ser um material osteocondutor que estimula o crescimento ósseo. O Rock Screw TCP é radiopaco.

- **70% PLA (Poliácido Láctico)**
- **30% β -TCP (Beta Fosfato Tricálcio)**

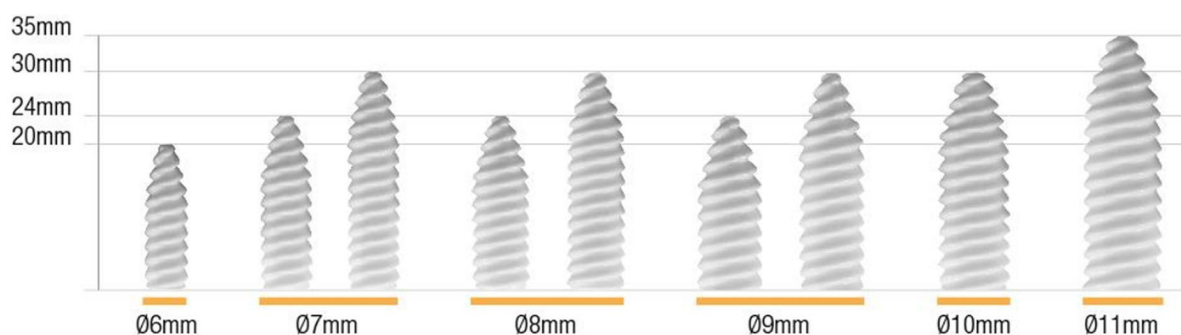


Armazenamento:

O Rock Screw TCP deve ser armazenado em sua embalagem original fechada, em local limpo e seco e a temperatura inferior a 37°C.



| VOCÊ, SEMPRE EM MOVIMENTO_

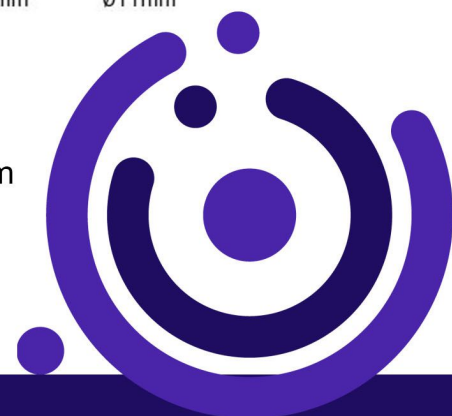


Modelos

REF.	DESIGNAÇÃO	TIPO
IK730620NG	ROCKSCREW TCP	Ø 6MM L 20MM
IK730724NG	ROCKSCREW TCP	Ø 7MM L 24MM
IK730730NG	ROCKSCREW TCP	Ø 7MM L 30MM
IK730824NG	ROCKSCREW TCP	Ø 8MM L 24MM
IK730830NG	ROCKSCREW TCP	Ø 8MM L 30MM
IK730924NG	ROCKSCREW TCP	Ø 9MM L 24MM
IK730930NG	ROCKSCREW TCP	Ø 9MM L 30MM
IK731030NG	ROCKSCREW TCP	Ø 10MM L 30MM
IK731135NG	ROCKSCREW TCP	Ø 11MM L 35MM


Alta resistência ao torque:

Desenvolvido para reduzir o risco de fratura devido a melhor distribuição das forças. O parafuso apresenta internamente perfeito encaixe com a chave e esse contato permite a transmissão da força em modo de compressão e não em modo de corte, o que aumenta a resistência à fratura no momento do torque.

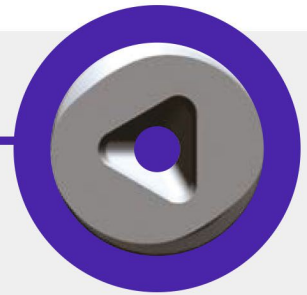


Auto rosqueante e cabeça plana:

Ponta cônica e roscas específicas que minimizam a necessidade de macheamento ósseo e evitam atrito ao tecido mole.

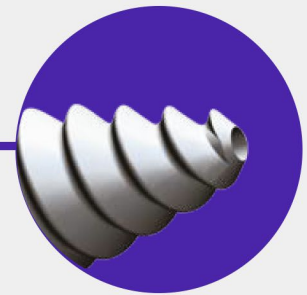

Rosca dupla - Introdução rápida:

Dupla rosca que reduz o número de voltas necessárias para introduzir o parafuso no túnel ósseo pré-perfurado. Como resultado facilita a inserção e preserva a integridade dos enxertos.

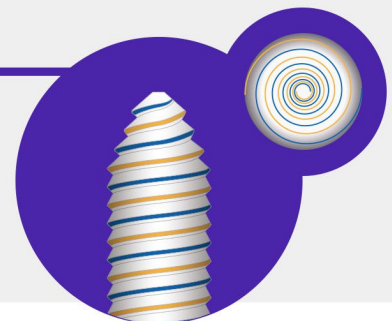

+55 11 2629-4344

+55 11 97483-4390

vendas@importek.com.br

Rua Niterói, 362 - Sala 17 - Centro - São Caetano do Sul/SP

 importek

importek.com.br