

Catálogo de Produtos **COLUNA**

PARAFUSO PREMIER 5.5

Sistema para deformidade


- Parafuso com duplo passo de rosca na mesma hélice (2 mm entre o passo de rosca), onde o parafuso progride de forma mais rápida no pedículo, em comparação com roscas convencionais.

A hélice mais estreita, reduz a pressão intraóssea, favorecendo a consolidação óssea.

- Parafuso de baixo perfil de 2,0 mm,
- Angulação de 50°, oferecendo versatilidade na instrumentação.
- Porção lisa que reduz o risco de soltura do implante.
- Corpo do parafuso cônico que melhora a performance na colocação, com ponta tipo bala para evitar o falso trajeto durante a inserção.
- Parafuso auto macheante.



Ponta cônica:
Facilita inserção
e minimiza
lesões durais.

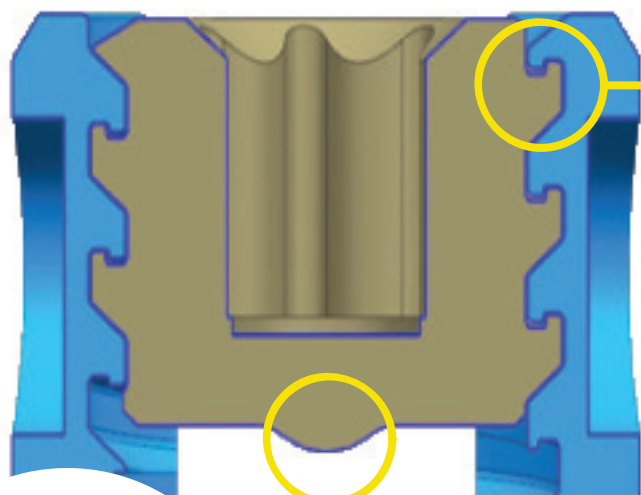

• Ponto convexo no bloqueador que evita o pull-out do mesmo.

• Gancho invertido com a rosca trapezoidal para evitar a abertura da cabeça do parafuso para as laterais.

Implantes :

- Parafuso multiaxial, monoaxial, uniplanar e de redução (multiaxial e monoaxial).
- Barra em Cromo-Cobalto e Titânio.
- Conectores laterais, conectores tipo dominó, ganchos, crosslink, conector open-open e conector open-close.

Único sistema no mercado que acompanha 16 torres de derivação